


Ficha de referência do médico

Emparelhamento de componentes

IMPORTANTE: Emparelhe os componentes do sistema antes do emparelhamento com o aplicativo do médico

- 1 Manguito da coxa com o manguito inferior.
Ativação do modo de emparelhamento do EPG: Pressione simultaneamente os botões Mais e Menos em cada EPG. A luz indicadora de status do EPG piscará em verde, amarelo e vermelho.
- 2 Se necessário, emparelhe o sensor de pé com o EPG do manguito inferior.
Ativação do modo de emparelhamento do sensor de pé: Emparelhe o sensor de pé com um novo EPG colocando uma bateria (CR2032) no sensor de pé e pressionando o sensor de pressão. A luz verde piscará para confirmar a ativação do modo de emparelhamento. Coloque o EPG inferior no modo de emparelhamento.

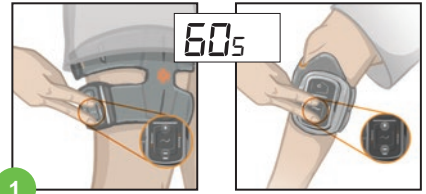

Emparelhamento do sistema com o aplicativo do programador médico da Bioness

- 1 Faça login no aplicativo do programador médico da Bioness
- 2 Selecione para acessar a tela de conexão. Coloque o sistema no modo de emparelhamento pressionando simultaneamente os botões Mais e Menos no EPG. Selecione o ícone de conexão acima da perna desejada. Uma vez efetuado o emparelhamento, saia da tela de conexão clicando em .
- 3 Selecione um paciente, por exemplo, *Trabalhar com paciente existente*, *Criar novo* ou *Escolher da lista*. Caso esteja selecionando a partir da lista de pacientes, pressione o ícone Carregar ou clique duas vezes no nome escolhido.





Ajuste do Sistema L300 Go

- 1 Fixe o painel pessoal.
- 2 Deslize a cobertura da correia pessoal sobre a correia do manguito.
- 3 Limpe a área de estimulação com um pano macio e úmido. Em seguida, estenda ligeiramente a parte inferior da perna.
- 4 Quando o(s) eletrodo(s) estiver(em) conectado(s) ao manguito L300, coloque o manguito sobre a perna usando o localizador de patela do manguito, prenda a correia e ajuste a tensão.
- 5 Programe as configurações de estimulação para obter a resposta desejada.







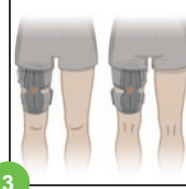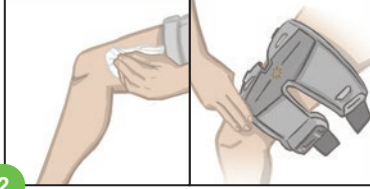







Ajuste do L300 Go apenas para a coxa


- 1 Molhe os eletrodos de pano da coxa e encaixe-os no manguito.
- 2 Limpe a área de estimulação com um pano macio e úmido. Coloque o manguito sobre a coxa, não menos do que três dedos proximal à fossa poplíteia (aplicação isquiotibial) ou à patela (aplicação no quadríceps).
- 3 Centralize o manguito na linha média da coxa. Prenda as correias.
- 4 Programe as configurações de estimulação com o paciente sentado para obter a resposta desejada.
- 5 Se necessário, ajuste as configurações de estimulação com o paciente em pé.



Programação do Sistema L300 Go

- 1  Programe as configurações de estimulação. Selecione o EPG desejado no painel de controle de estimulação. Selecione o tipo de eletrodo (a imagem mostra a tela do eletrodo de direcionamento). Com o paciente sentado, pressione  **Teste** para ativar a estimulação no EPG selecionado. Ajuste as configurações para obter a resposta desejada. Pressione  **Teste** para interromper a estimulação. Repita a operação para todos os EPGs conectados.
- 2  Programe as configurações de andadura. Pressione o ícone da tela de andadura. Pressione o  ícone da onda de estimulação para habilitar o modo de andadura. Observe o paciente andando e ajuste as configurações conforme necessário. Pressione o  ícone da onda de estimulação para interromper a estimulação.
- 3  Programe as configurações de treinamento. Pressione o  ícone da tela de treinamento. Ajuste as configurações de treinamento, inclusive excluindo um EPG específico, conforme desejado. Pressione o ícone de Treinamento para ativar a estimulação em todos os dispositivos emparelhados incluídos no modo de treinamento. Pressione o  ícone de treinamento para interromper a estimulação.
- 4 No final de cada sessão, desconecte o sistema navegando até a  tela de conexão e pressionando o  ícone para desfazer a conexão. Saia do aplicativo do médico.

Observação: Pressione e segure o  ícone de estimulação manual para ativar a estimulação em todos os EPGs emparelhados e ativos, enquanto o botão estiver pressionado.

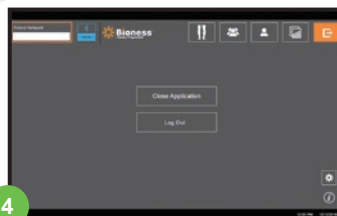

Bioness Inc.
25103 Rye Canyon Loop
Valencia, CA 91355
Telephone: 800.211.9136
E-mail: info@bioness.com
Site: www.bioness.com



Bioness Europe B.V.
Stationsweg 41
3331 LR Zwijndrecht, Países Baixos
Telephone: +31.78.625.6088
E-mail: international@nl.bioness.com
Site: www.bioness.com



CE
2797