



CINTOS E
ACESSÓRIOS DE
POSICIONAMENTO

JAY GS

zipie



POSICIONAMENTO DA CABEÇA



APOIOS DE CABEÇA WHITMYER

O suporte da coluna cervical e cabeça é uma parte integral dentro do posicionamento global do paciente em cadeira de rodas. A gama de apoios de cabeça Whitmyer® oferece suporte a nível posterior, lateral, e anterior para os utilizadores que apresentam dificuldades em manter uma postura erguida da cabeça ou utilizadores de cadeiras basculantes. Dentro das inúmeras opções disponíveis, encontramos diferentes tipos de almofadados, 5 braços de montagem, 3 tipos de fundas e múltiplos acessórios e suportes adicionais para se poder criar a configuração mais adequada em cada caso.

PLUSH



Almofadado com contorno de espuma de alta qualidade, composta por capas de diferentes densidades. A sua forma única proporciona suporte posterior com alto grau de conforto e segurança para o paciente.

PLUSH AJUSTABLE



Almofadado Plush com uma secção central posterior e 2 laterais que podem ser articulados para se adaptarem à necessidade de suporte lateral do utilizador. Ideal para pacientes com débil controlo de cabeça que requerem suporte lateral, unilateral ou bilateral.

CONTOURED CRADLE



A chave do seu êxito deriva da sua forma anatómica, que proporciona suporte suboccipital, occipital e cervical numa única peça. Ideal para cadeiras reclináveis e basculantes.

HEADS UP



Heads Up é um suporte de cabeça inovador, desenhado para maximizar a interação do utilizador com o meio envolvente. Acrescenta ao suporte de cabeça, estabilidade anterior e lateral de ombros e tronco, para um posicionamento ótimo da cabeça.

S.O.F.T. 2 PEÇAS



O sistema SOFT de duas peças proporciona além de suporte occipital posterior, suporte a nível suboccipital e cervical lateral, graças à sua almofada suboccipital contornada. Ideal para assimetrias laterais moderadas.

S.O.F.T. 3 PEÇAS Adulto e Pediatria ATENÇÃO PRECOCE



Sistema de 3 almofadas que combina 2 almofadas suboccipitais ajustáveis em largura e rotação, com uma almofada occipital com ajuste ântero-posterior independente. Indicado nos posicionamentos de cabeça mais desafiantes.



Os apoios de cabeça de Atenção Precoce Whitmyer oferecem um excelente suporte para os mais pequenos. Modelos Contoured Cradle e SOFT de 3 peças.

BRAÇOS DE MONTAGEM WHITMYER

AXYS



LINX



PRO



COBRA XTRA



COBRA XTRA ABATÍVEL





POSICIONAMENTO DO TRONCO E EXTREMIDADES SUPERIORES

SUPORTE DE TRONCO

O suporte anterior de tronco adequado a cada utilizador favorece a postura erguida, melhorando consequentemente o posicionamento da cabeça, a função respiratória e a função das extremidades superiores.

Tudo isto se repercute diretamente no bem-estar e na qualidade de vida do utilizador, aumentando o conforto e tolerância à posição sentada.

Dentro da gama de suportes de tronco JAY temos 6 modelos, cada um com opção de têxtil Dinâmico ou Standard.

A qualidade do acolchoado proporciona um conforto e sensação de bem-estar excepcional.


COLETE ESTILO CLÁSSICO



O colete de estilo Clássico foi desenhado para uma distribuição ótima e confortável do suporte e máxima estabilidade.

	* DINÂMICO	STANDARD	A [mm]	B [mm]
AT	ATS8107	–	165	250
XS	ATS8100	ATS8300	190	320
S	ATS8101	ATS8301	215	380
M	ATS8102	ATS8302	240	485
L	ATS8103	ATS8303	265	570
XL	ATS8104	ATS8304	290	650

COLETE CONTOUR

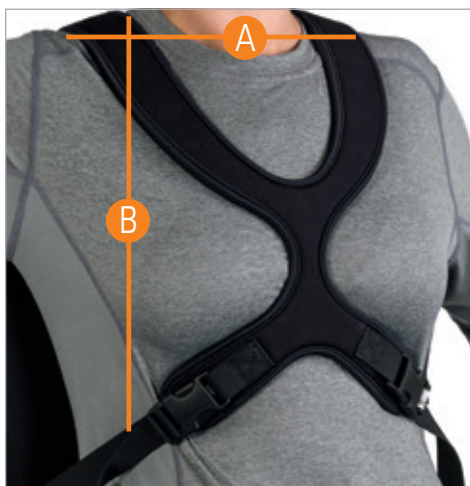

O colete Contour tem uma forma otimizada para se adaptar melhor à anatomia feminina ou para as pessoas que pretendem limitar a área de contato entre o arnês e o corpo.

	* DINÂMICO	STANDARD	A [mm]	B [mm]
AT	ATS9107	—	165	250
XS	ATS9100	ATS9300	190	320
S	ATS9101	ATS9301	215	380
M	ATS9102	ATS9302	240	470
L	ATS9103	ATS9303	270	570
XL	ATS9104	ATS9304	290	650

COLETE COM FECHO



O colete com fecho de correr, permite colocar e tirar o cinto com grande rapidez, facilitando as transferências. Ideal para utilizadores com função da mão limitada.

	*DINÂMICO	A [mm]	B [mm]
S	ATS8701	215	380
M	ATS8702	240	485
L	ATS8703	270	570
XL	ATS8704	290	650

COLETE COM FIVELA CENTRAL AJUSTÁVEL



O colete com abertura central proporciona maior facilidade nas transferências frequentes e a sua fivela ajustável, permite um posicionamento mais preciso.

	* DINÂMICO	STANDARD	A [mm]	B [mm]
AT	ATS8807	ATS9407	130	250
XS	ATS8800	ATS9400	145	280
S	ATS8801	ATS9401	165	310
M	ATS8802	ATS9402	250	360
L	ATS8803	ATS9403	250	395
XL	ATS8804	ATS9404	255	440



COLETE EM "Y"



O colete em Y foi desenhado especialmente para os casos em que se procura maximizar a amplitude de mobilidade de um braço e simultaneamente manter-se o suporte ótimo. Ideal também nos casos de rotação do tronco.

	* DINÂMICO	STANDARD	A [mm]	B [mm]
AT	ATS9167	ATS9367	380	180
S	ATS9161	ATS9361	485	200
M	ATS9162	ATS9362	560	230
L	ATS9163	ATS9363	635	280


CINTO TORÁCICO ANTERIOR



O cinto torácico anterior proporciona uma maior liberdade de movimentos. Permite a rotação de ombros e um maior alcance/funcionalidade. Máxima função para as atividades da vida diária e tratamentos de terapia.

	STANDARD	A [mm]	B [mm]
XS	ATS4050	205	75
S	ATS4000	255	75
M	ATS4100	305	75
L	ATS4200	355	100
XL	ATS4300	405	100

CINTOS "TIPO MOCHILA" (UNILATERAL)

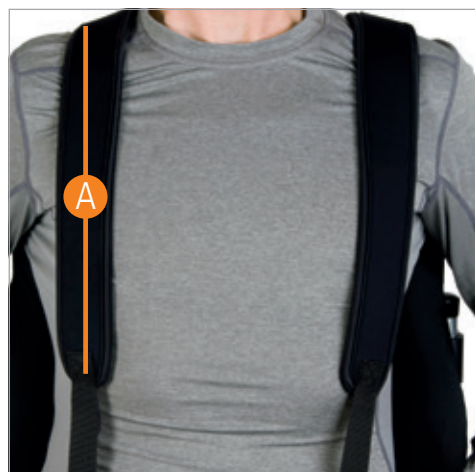

Permite um controlo mais incisivo da cintura escapular e cabeça nos casos de antepulsão dos ombros e/ ou cifoses. Consegue-se uma retração de ombros mais precisa que se repercute numa posição erguida do tronco e cabeça.

	* DINÂMICO	STANDARD	A [mm]
S	ATS9601	ATS9701	305
L	ATS9603	ATS9703	460

EXTREMIDADES SUPERIORES

Os suportes de braços e mãos favorecem uma posição confortável das extremidades superiores, melhorando assim a postura do tronco e cabeça, e com isso as funções fisiológicas e a interação com o meio envolvente.

O seu material almofadado, a placa de gel e as fundas antifricção garantem a proteção da pele.

SUPORTE DE ANTEBRAÇO



A sua forma com contorno e o almofadado extra, garantem o conforto e o alinhamento da extremidade superior. Disponível com fixação Fixa ou Abatível.

A [mm]	MONTAGEM	
	FIXA	ABATÍVEL
360	JARM14F	JARM14SA
460	JARM18F	JARM18SA
560	JARM22F	JARM22SA



Montagem fixa



Montagem abatível

FAIXA DE PULSO ACOLCHOADA



O acolchoado extra das faixas de pulso JAY permite um suporte e fixação tanto eficaz como confortável.

	CINTO	CIRCUNFERÊNCIA FAIXA
S	ATS7510	De 140 a 180 mm
M	ATS7520	De 190 a 230 mm
L	ATS7530	De 240 a 280 mm

FUNDA DE GEL PARA APOIOS DE BRAÇOS



Foi desenhada para conforto extra e proteção da pele.

	FUNDA DE GEL
Apoio de braços de escritório	131066
Apoio de braços Compridos	131067
Apoio de braços Reclináveis Elétricos (Dir.)	131071
Apoio de braços Reclináveis Elétricos (IEsq.)	131072



POSICIONAMENTO DA PÉLVIS E EXTREMIDADES INFERIORES

POSICIONAMENTO PÉLVICO

Os cintos pélvicos são um acessório chave para manter a pélvis estável e alinhada, o qual é fundamental para o bom posicionamento de todo o corpo. A gama de cintos pélvicos JAY é ampla, com diferentes desenhos de suporte, tamanhos, ajuste duplo ou único e vários mecanismos de abertura, para dar resposta às diferentes necessidades clínicas de cada utilizador. O almofadado garante o conforto em zonas sensíveis e proeminências ósseas.

OPÇÃO DE ACOLCHOADO EXTRA

Consiga o máximo conforto juntando uma capa adicional de acolchoado.

Acolchoado do cinto	LARGURA CINTO [mm]	LARGURA [mm]	COMPRIMENTO [mm]
APB1801	25	40	140
APB1802	25	40	190
APB1803	40	50	190
APB1804	40	60	240
APB1805	50	70	240
APB1806	50	70	290

CINTO 2 PONTOS COM BOTÃO PULSADOR METÁLICO



Largura 25 mm, sem acolchado

O cinto pélvico de 2 pontos oferece um posicionamento seguro e confortável da pélvis com a mínima superfície de contato.

25 mm	SEM ACOLCHOADO	ACOLCHOADO 115 mm	ACOLCHOADO 140 mm	ACOLCHOADO 190 mm
	Ajuste único	APB5110	APB5115	APB5116
Duplo ajuste	—	APB5125	APB5126	APB5127
40 mm	SEM ACOLCHOADO	ACOLCHOADO 140 mm	ACOLCHOADO 190 mm	ACOLCHOADO 240 mm
	Ajuste único	APB7210	—	APB7212
Duplo ajuste	—	APB7221	APB7222	APB7223
50 mm	SEM ACOLCHOADO	ACOLCHOADO 240 mm	ACOLCHOADO 290 mm	
	Ajuste único	APB7310	APB7313	APB7314

CINTO 2 PONTOS COM FIVELA DE PRESSÃO LATERAL (PLÁSTICO)



25 mm	SEM ACOLCHOADO	ACOLCHOADO 140 mm	ACOLCHOADO 190 mm
Ajuste único	APB6110	APB6111	APB6112
Duplo ajuste	–	APB6121	APB6122

40 mm	SEM ACOLCHOADO	ACOLCHOADO 190 mm	ACOLCHOADO 240 mm
Ajuste único	APB6210	APB6212	APB6213
Duplo ajuste	–	APB6222	APB6223

50 mm	SEM ACOLCHOADO	ACOLCHOADO 240 mm	ACOLCHOADO 290 mm
Ajuste único	APB6310	APB6313	APB6314

CINTO 4 PONTOS ACOLCHOADO COM BOTÃO PULSADOR METÁLICO



Com 4 pontos de fixação em vez de 2, os cintos pélvicos de 4 pontos proporcionam um extra de segurança e resistência, para necessidades de posicionamento mais complexas. O seu acolchoado garante o conforto permanente.

	ACOLCHOADO 90 mm	ACOLCHOADO 115 mm	ACOLCHOADO 140 mm	ACOLCHOADO 165 mm
25 mm	APB5145	APB5146	–	–
40 mm	–	APB7242	APB7243	APB7244

CINTO 4 PONTOS EM V



O seu desenho único com almofadado em V e 4 pontos, fortalece a fixação do cinto e amplia a superfície de contato, garantindo o conforto no suporte e a distribuição ótima da pressão para proteção da pele. Suporte mais efetivo com conforto excepcional.

	25 mm com fivela lateral	40 mm com fivela	50 mm com fivela
PEQUENO	APB3616	–	–
MÉDIO	–	APB3627	–
GRANDE	–	–	APB3638

	25 mm com pulsador	40 mm com pulsador	50 mm com pulsador
PEQUENO	APB3716	–	–
MÉDIO	–	APB3727	–
GRANDE	–	–	APB3738



SUPORTES DE PÉS E TORNOZELOS

POSICIONADOR DO PÉ E TORNOZELO (UNIDADE)



	PÉ E TORNOZELO	APENAS TORNOZELO	A [mm]	B [mm]
XS	-	TST6501R TST6501L	150	115
S	TST6510R TST6510L	TST6511R TST6511L	200	130
M	TST6520R TST6520L	TST6521R TST6521L	200	130
L	TST6540R TST6540L	TST6541R TST6541L	250	150
XL	TST6560R TST6560L	TST6561R TST6561L	270	165

Inclui o suporte de tornozelo com 3 pontos de fixação sobre uma plataforma de ABS. Ajustes no tornozelo e calcanhar. A faixa almofadada para os pés garante o controlo integral do pé e tornozelo. O tecido da faixa é transpirável e almofadado, para garantir uma fixação confortável.


SANDÁLIA POSICIONADORA (UNIDADE)



	ACOLCHOADO	SEM ACOLCHOADO	A [mm]	B [mm]
S	TST6001	TST6000	145	75
M	TST6101	TST6100	200	85
L	TST6201	TST6200	250	100
XL	TST6301	TST6300	325	150

Sandália com dupla parede curva para eliminar rebordos afiados. Disponível com faixas com/ sem almofadado.

SANDÁLIA POSICIONADORA COM ALÍVIO DO TENDÃO (UNIDADE)

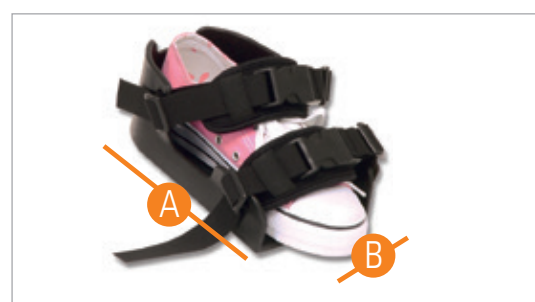

	ACOLCHOADO	A [mm]	B [mm]
S	TST6061	145	75
M	TST6161	200	85
L	TST6261	250	100
XL	TST6361	325	135

Sandália com parede alta para posicionamento mais agressivo, com corte para alívio do tendão de Aquiles. Com faixas almofadadas.

POSICIONADORES DE PÉS FLEXÍVEIS (PAR)



	FLEXI-FEET	A [mm]	B [mm]
XS	32600XS-RT	115	70
S	32600S-RT	160	75
M	32600M-RT	210	90
L	32600L-RT	230	115

O sistema flexi-feet incorpora um têxtil almofadado e elástico com componente dinâmico. Ideal para utilizadores com alterações do tônus e movimentos involuntários.

ADUCTOR DE JOELHO



Cómodo e eficaz para manter o alinhamento das extremidades inferiores. Sistema reforçado ideal para utilizadores com tónus alto. O ajuste em ângulo do almofadado adutor, permite um posicionamento preciso ao utilizador.

BRAÇO MONTAGEM + ALMOFADA ADDUCTORA		A [mm]	B [mm]	Almofada [mm]
KAK2103L	Curto Esq. com alm.	165	50	75
KAK2104L	Curto Esq. com alm.	165	50	100
KAK2103R	Curto Dir. com alm.	165	50	75
KAK2104R	Curto Dir. com alm.	165	50	100
KAK3103L	Compr. Esq. com alm.	215	90	75
KAK3104L	Compr. Esq. com alm.	215	90	100
KAK3103R	Compr. Dir. com alm.	215	90	75
KAK3104R	Compr. Dir. com alm.	215	90	100

Braço montagem e Almofadas adutoras, estão disponíveis como peças de reposição.

SUPOORTE DE PÉS

Os suportes de pés com almofadado extra e funda antifricção, protegem a integridade da pele e ajudam a prevenir lesões derivadas de episódios de tónus alto provocados pelo contato contínuo com os apoios de pés e plataformas. São um excelente complemento para garantir o conforto e a segurança na posição sentada.

SUPOORTE DE PÉS INDIVIDUAL



	ALTURA	A [mm]	LARGURA B [mm]
JFOOTSS	Standard	205	190
JFOOTST	Alto	305	190

SUPOORTE DE PÉS DUPLO COM SEPARAÇÃO



	LARGURA cadeira [cm]	ALTURA posicionador	A [mm]	LARGURA posicionador B [mm]
JFOOT16SD	40,5	Standard	205	343
JFOOT18SD	46	Standard	205	394
JFOOT20SD	51	Standard	205	444
JFOOT22SD	56	Standard	205	495
JFOOT16TD	40,5	Alto	305	343
JFOOT18TD	46	Alto	305	394
JFOOT20TD	51	Alto	305	444
JFOOT22TD	56	Alto	305	495

SUPOORTE PÉS COMPLETO (DUPLO)



	LARGURA cadeira [cm]	ALTURA posicionador	A [mm]	LARGURA posicionador B [mm]
JFOOT12S	30,5	Standard	205	241
JFOOT14S	35,5	Standard	205	290
JFOOT16S	40,5	Standard	205	343
JFOOT18S	45,5	Standard	205	394
JFOOT20S	51	Standard	205	444
JFOOT22S	56	Standard	205	495
JFOOT16T	40,5	Alto	305	343
JFOOT18T	46	Alto	305	394
JFOOT20T	51	Alto	305	444
JFOOT22T	56	Alto	305	495



Para mais informações sobre opções e disponibilidades, consulte a nota de encomenda.

Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt



Rev.1 - Setembro 2017