



**BELIEVE | LIVE | INSPIRE**

# » RGK TÃO INDIVIDUAL COMO TU

Há mais de três décadas que os fundadores da RGK se uniram pela paixão pelo basquetebol em cadeira de rodas.

Naquele tempo, as cadeiras disponíveis não estavam pensadas para o desporto. Apareciam as primeiras cadeiras de estrutura rígida, mas não eram personalizadas nem realmente adaptadas a cada indivíduo.

Nasceu então a ideia de criar a RGK.

Mais de 30 anos depois, temos uma grande equipa que graças à sua capacidade, paixão e compromisso converteram aquela ideia numa marca de máximo prestígio a nível mundial.

# A Jama

Abdi Jama, capitão da seleção britânica de basquetebol em cadeira de rodas.  
2 vezes medalha de bronze nos Paralímpicos  
2 vezes medalha de ouro nos Europeus

Respeitar a individualidade de cada pessoa é a filosofia da RGK. Porque pensamos que não há dois indivíduos iguais, mas sim que cada pessoa é única.

Por isso, as nossas cadeiras constroem-se só para ti, totalmente individualizadas para se adaptarem à tua fisionomia, aos teus gostos, à tua vida.

Esta personalização total, permite-nos fornecer uma cadeira da mais alta qualidade que responde de forma imediata a cada um dos teus movimentos.

Descobre com a RGK um mundo cheio de sensações. Uma transmissão perfeita da tua energia.



# » TÃO INDIVIDUAL COMO TU

Uma cadeira que se adapta às tuas medidas e formas, como uma segunda pele.

Uma cadeira leve, que responde imediatamente a cada um dos teus movimentos. Um mundo cheio de sensações, uma transmissão directa de energia!

Com o melhor do design e qualidade nos seus materiais; Personalizada ao mínimo detalhe para que seja um reflexo de ti, dos teus gostos, das tuas ambições, do teu carácter. Um encaixe perfeito.

# PROCESSO DE CRIAÇÃO DA TUA CADEIRA



## 1. CONHECER-TE

Escutar-te e entender os teus gostos, necessidades e estilo de vida, dá-nos a base para iniciar o processo de criação da tua cadeira.



## 2. AS TUAS MEDIDAS

Assessoramos e medimos-te para que a cadeira se adapte às tuas medidas e fisionomia, para se seja parte de ti, um encaixe perfeito, a tua segunda pele.



## 3. O TEU DESENHO

As tuas medidas são introduzidas no nosso sistema CAD pelos nossos designers, obtendo imagens 3D precisas. Este desenho em 3D marca o início da CRIAÇÃO da tua cadeira!



## 4. CRIAÇÃO

A tua cadeira nasce para a vida de forma artesanal pela mão da nossa experiente equipa de técnicos.



## 5. QUALIDADE

Uma vez criada a cadeira com todos os componentes, é submetida a rigorosos testes de inspeção e qualidade.



## 6. AO TEU GOSTO

Porque a estética e a tua identidade são importantes, temos disponível uma grande gama de cores para o chassi e acessórios. Inclusivamente poderás escolher o design e cor do bordado na tua tela! Só tens que nos dizer como queres a cadeira e fazemo-la personalizada para ti!

# ÍNDICE

---



## **ELITE X**

Cadeira para basquetebol de competição, ideal no jogo mais exigente. A combinação perfeita entre a tecnologia mais avançada e os materiais mais inovadores.

Pag. 8-9



## **ELITE**

Cadeira para basquetebol de competição de fabrico totalmente personalizado. Máxima rigidez. Puro rendimento.

Pag. 10-11

# Cadeiras desportivas

---



## **GRAND SLAM**

Cadeira para a prática de ténis de competição fabricada completamente personalizada. Grande manobrabilidade e facilidade de manobra.

Pag. 12-13



## **CLUB SPORT**

A cadeira desportiva mais versátil para níveis iniciais e médios. Indispensável na tua equipa!

Pag. 14-15

# Cadeiras manuais

---



## **OCTANE SUB 4**

A cadeira de titânio totalmente personalizada mais leve. Menos de 4 kg, garantido!

Pag. 16-19



## **TIGA FX**

Cadeira de rodas rígida que se encarta... para os mais viajantes!

Pag. 26-27



## **TIGA SUB 4**

A cadeira de alumínio personalizada mais leve e com a rolamento mais perfeito. Menos de 4 kg, garantido!

Pag. 20-23



## **HI LITE**

Cadeira de rodas personalizada em titânio. Máxima eficiência e comodidade na condução.

Pag. 28-29



## **TIGA**

Cadeira de rodas rígida personalizada, com o máximo rendimento.

Pag. 24-25




## **FRONTWHEEL**

Roda frontal todo o terreno para cadeiras de rodas manuais RGK. Máxima liberdade em todas as superfícies.

Pag. 30-31

# ELITEX

» THE BEST JUST GOT BETTER

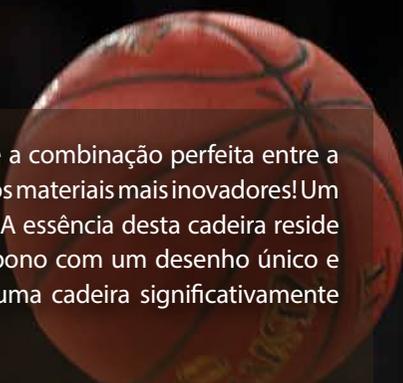

O futuro chegou. A Elite X é a combinação perfeita entre a tecnologia mais avançada e os materiais mais inovadores! Um salto quântico no desenho! A essência desta cadeira reside na sua barra central de carbono com um desenho único e pioneiro, que a converte numa cadeira significativamente mais rígida e leve.

O novo desenho TRI-FRAME da armação marca a grande diferença no momento de distribuir a energia durante o jogo. Com o incrível rendimento e capacidade de resposta oferecidos pela Elite X... não haverá desculpas para não ganhar a partida!

# Elite X, a nova geração em cadeiras de basquetebol

A combinação perfeita entre a tecnologia mais avançada e os materiais mais inovadores

Apenas os materiais da melhor qualidade são usados na Elite X. O alumínio 7020, para além de muito leve, garante uma excelente resistência e durabilidade: o tratamento térmico aplicado aumenta a dureza da superfície, a resistência à temperatura e a rigidez da armação. Com a integração com a fibra de carbono, temos um material adicional que é 1,5 vezes mais leve do que o alumínio, mas com grande resistência à tração (8 vezes mais resistente do que o alumínio!).

## Características

- » Barra central de carbono (Carbon bar)
- » Protetores laterais soldados e com preenchimentos em fibra de carbono. Sem limitação de forma e com o acabamento mais perfeito, graças ao novo sistema CNC incorporado.
- » Desenho da armação TRI-FRAME
- » Tratamento térmico A10 aplicado ao armação
- » Rolamentos em cerâmica nas rodas traseiras, dianteiras e armação (opcional)
- » Fixações em titânio
- » Presilhas em titânio no tecido
- » Alterações pormenorizadas ao desenho que reduzem o peso da cadeira
- » Biomecânica otimizada para potência e eficiência máximas
- » Posicionamento do assento que se adapta ao seu jogo



Tubo do eixo em carbono para máxima rigidez e leveza. Fixado à armação através de abraçadeiras, permite um ajuste fino do ângulo das rodas traseiras (toe in/toe out) para um rolamento perfeito.



Protetores laterais soldados com preenchimentos em fibra de carbono. Personalização com o sistema CNC, que permite desenhar qualquer forma e oferece um acabamento muito bonito. Cada lateral é único e com um acabamento impecável.



Desenho da armação TRI-FRAME. O inovador desenho TRI-FRAME é o que melhor distribui a energia gerada durante o jogo por toda a armação da cadeira. Rigidez e força máximas.



Rolamentos de cerâmica. A mais alta qualidade de rolamento nas rodas traseiras, dianteiras e armação para um rolamento excelente.

# elite

» PAIXÃO PELA  
VITÓRIA



Porque somos apaixonados pelo desporto.

Tal como tu treinas e te esforças para estar no topo, nós trabalhamos constantemente no design e produção das cadeiras da mais alta qualidade.

Para alcançar o mais alto nível. O nível que te leva ao êxito.

Porque cada jogador é único, percebemos a importância da tua cadeira se adaptar perfeitamente a ti e às tuas necessidades individuais dentro do campo.

Com a confiança de que a tua cadeira foi produzida individualmente para maximizar O TEU potencial, só tens que te concentrar no jogo, nos teus objectivos.

Na tua Vitória!

# Elite, Máxima rigidez. Puro rendimento

Desenhada e personalizada, como uma segunda pele. Para ti, para as tuas vitórias.

A Elite foi desenhada para os desportistas de alto nível, que conhecem as suas necessidades e querem estar no mais alto nível da competição. De fabrico totalmente personalizado de acordo com as necessidades de jogo de cada desportista, ELITE lidera o caminho no design, rendimento e eficiência. A cadeira de alta gama que te leva onde quiseres ir, só tens que a tocar. Reacção imediata a cada um dos teus movimentos. O seu design com integração no chassis do tubo do eixo, apoios de pés, armação defensiva e anti-volteios convertem a ELITE na cadeira mais competitiva. RIGIDEZ e LEVEZA... Sente a velocidade da competição!!

## Características

- » Chassis rígido personalizado alumínio 7020
- » Look moderno e muito desportivo
- » Centro de Gravidade, armação defensiva e anti-volteios integrados no chassis
- » Apoio de pés integrado
- » Opção de centro de gravidade e apoio de pés ajustáveis
- » Assento e encosto ergonómico
- » Opções de camber 16°, 18°, 20°, 22°
- » Múltiplas opções no design da armação defensiva
- » Tela do assento ajustável em tensão
- » Tela de encosto AirTech Sport transpirável
- » Rodas dianteiras com rolamentos Bones Reds (baixa fricção)
- » Opção de base rígida em alumínio/carbono
- » Peso máx. utilizador 125 kg



Anti-volteio integrado com ajuste em altura (unidade ou par)



Tubo do eixo integrado



Forqueta de alumínio integrada, resistente e leve

E ainda, rodas dianteiras com rolamentos Bones Reds como standard. Reduzem a fricção, minimizando a energia necessária para propulsar a cadeira, facilitando a manobrabilidade no jogo.



Apoio de pés integrado com cinta de pés

# grand slam

» CONQUISTA  
O CAMPO



No campo cada serviço é decisivo. Um segundo perdido pode marcar a diferença entre uma vitória e uma derrota.

Grand Slam é uma cadeira para a prática de ténis de competição, à altura dos melhores campeões paralímpicos do mundo. É fabricada de forma personalizada para se adaptar às medidas e preferências de jogo de cada um.

O resultado desse sistema artesanal de fabrico é uma cadeira ágil e rápida, que responde de forma imediata a cada um dos teus movimentos, com um só toque. Mais do que uma cadeira, é parte de ti.

Sabemos que... só o melhor te levará ao êxito.

# Grande manobrabilidade e facilidade de manobra

Grand Slam é a cadeira de ténis para a alta competição. Concebida para ganhar.

Rigidez e rendimento. Agilidade e design.

São as principais características da GRAND SLAM, uma cadeira de ténis de fabrico totalmente personalizado, onde cuidámos de cada detalhe para que possa dar 100% em cada jogo.

A velocidade na rotação é fundamental no ténis. Por isso, GRAND SLAM está disponível com camber a 16°, 20° ou 22° para te proporcionar uma maior manobrabilidade.

O sistema de suporte dos joelhos ajustável, dá a fixação que necessitas durante o jogo, otimizando a estabilidade para máxima ação.

Ou seja... só tens que te deixar levar e dominar o jogo!

## Características

- » Chassis Rígido Personalizado Alumínio 7020
- » Look Moderno e Desportivo
- » Sistema de estrutura Ténis com suporte de joelhos ajustável
- » Centro de gravidade e antivoltio integrado no chassis.
- » Apoio de pés integrado
- » Opção de centro de gravidade e apoio de pés ajustáveis
- » Assento e encosto Ergonómico
- » Opções Camber 16°, 18°, 20°, 22°
- » Múltiplas opções de rodas, aros e cintas de fixação
- » Tela de assento e encosto ajustável em tensão
- » Opção de base rígida de alumínio/carbono
- » Peso máximo utilizador 125 kg



O antivoltio integrado garante a máxima firmeza. Opção de antivoltio extraível.



Sistema de suporte de joelhos ajustáveis em altura, profundidade e ângulo, para óptima adaptação a cada jogador.



Os protetores laterais soldados asseguram a rigidez no suporte lateral.



Tubo do eixo integrado para máxima rigidez no jogo.

# CLUB SPORT

» **INDISPENSÁVEL  
NA TUA EQUIPA**



O nosso objectivo é promover e apoiar a participação no desporto, desenhando cadeiras que se adaptem a cada equipa e a cada jogador desde as idades mais precoces.

Estamos orgulhosos da nossa história e ligações com escolas, clubes desportivos e federações, colaborando com os mesmos para alcançar os melhores resultados na competição desportiva.

# A cadeira desportiva mais versátil

A Club Sport é ideal para níveis desportivos iniciais e médios, sendo equipamento indispensável no teu clube desportivo!

A sua versatilidade, compatível com vários desportos, o nível de tamanhos e a facilidade dos ajustes que permite, convertem a Club Sport na opção ideal para a prática de desporto.

Inclui de série almofada, anti-volteios extraíveis, armação defensiva e protectores de roupa, para te manter seguro na velocidade máxima. Preocupa-te só em marcar!

## Características

- » Chassis de Cromo Molibdénio
- » 4 opções de chassis configuráveis
- » Protectores laterais de Alumínio
- » Armação defensiva integrada no chassis
- » Apoio de pés regulável em altura e ângulo
- » Anti-volteio quick release regulável em altura
- » Aros de alumínio anodizado
- » Telas de assento e encosto ajustável em tensão
- » Encosto Ajustável em altura 250-300 mm
- » 18° Camber
- » Centro de gravidade ajustável
- » Rodas com pneus Kenda
- » Rodas dianteiras 3" com forqueta integrada
- » Cinta de pernas e cinta para os pés de série
- » Ampla gama de cores e personalizações das telas
- » Peso máximo do utilizador 125 kg



Protectores laterais de Alumínio



Armação defensiva integrada



Apoio de pés ajustável em altura e ângulo



Centro de gravidade ajustável e anti-volteio extraível

# OCTANE SUB4

» A CADEIRA EM  
TITÂNIO MAIS LEVE



## TECNOLOGIA EM TITÂNIO

A Octane Sub4 eleva o conceito de cadeira de rodas leves a um novo nível de rendimento e engenharia. Com a Octane Sub4 fomos um passo mais longe.

Esta cadeira é o resultado da combinação de um desenho clássico do chassis com a tecnologia Sub4 em titânio GRAU 9, o titânio de nível mais elevado. Com uma condução muito confortável graças às propriedades do titânio, nasce um modelo ultra leve mas ao mesmo tempo rígido, totalmente personalizada, para se adaptar perfeitamente a si e ao seu estilo de vida.

A cadeira de rodas ultraleve Octane Sub4 é desenhada e fabricada de forma individual segundo as medidas únicas do cliente, com a dedicação e o cuidado da produção artesanal própria da RGK. E isso, sem dúvida, nota-se.

# Tecnologia Sub4 – Peso garantido abaixo de 4 kg\*

A primeira cadeira de rodas em titânio totalmente personalizada e com um peso garantido abaixo de 4 kg\*

Este peso inclui todos os componentes da configuração standard: travões compactos, protetores laterais de carbono com fender, rodas dianteiras FrogLegs, plataforma apoio de pés de carbono e telas.

As rodas traseiras e a almofada não estão incluídos, uma vez que os poderás retirar facilmente para o transporte.

## Configuração standard

- » Totalmente personalizada, em Titânio GRAU 9, o nível mais alto
- » Centro de Gravidade fixo
- » Encosto fixo
- » Desenho em curva da barra estabilizadora
- » Desenho otimizado do eixo monotubo
- » Diâmetro reduzido do tubo do eixo, com fixações em titânio
- » Armação com acabamento brilhante ou acetinado
- » Travões compactos com montagem leve
- » Peso máximo do utilizador: 110 kg
- » Rodas dianteiras muito leves da Froglegs, com jantes em alumínio, de 4" x 1.25".
- » Rolamentos desportivos
- » Eixos Quick Release em Titânio
- » Rodas Spinery BLXL de 18 raios
- » Tecido do assento transpirável e ajustável em tensão, com fivelas em titânio

**O processo de fabrico artesanal da Octane Sub4 permite incorporar outras opções não standard (encosto dobrável, COG ajustável, etc.). Opções personalizadas.**



Disponível em armação com acabamento acetinado ou brilhante



Desenho otimizado de baixo perfil do tubo da forqueta



Desenho monotubo do eixo



Tecido do encosto Air Tech otimizado. Ajustável em tensão e com secção central transpirável; com fivelas em titânio.

# OCTANE SUB4

*ARMAÇÃO DE TITÂNIO GRAU 9*

- A MELHOR RELAÇÃO RIGIDEZ-LEVEZA
- ELEVADA ABSORÇÃO DE IMPACTOS
- RESISTENTE À CORROSÃO
- EXCELENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA



Reinventamos por completo como uma cadeira de rodas em titânio se deve comportar e como o deve fazer sentir. Com a redução do seu peso abaixo dos 4 kg\* graças à tecnologia Sub4, esta cadeira fará uma diferença significativa em todos os aspetos da sua vida.

## FABRICADA PARA DURAR

O titânio de GRAU 9, o nível mais elevado, apresenta uma extraordinária resistência à fadiga. Uma armação em titânio tem uma capacidade muito maior para se dobrar sem quebrar, resultante da sua elasticidade de até 25%, comparando com os 15% que oferece o aço ou os 8% do alumínio.

## CORROSÃO ZERO

Uma outra vantagem chave do titânio como material é que não oxida nem corrói, sendo muito resistente à água salgada e ao clima. É por isto que a Octane Sub4 é a cadeira de rodas ideal para as suas aventuras fora de casa.

## SUAVIDADE DE MOVIMENTO

O titânio GRAU 9 tem uma elevada capacidade de **absorção de impactos**, o que se traduz num efeito de **amortecimento das pancadas e vibrações** provocadas pelas irregularidades do terreno. Desta forma, desfrutará de uma marcha suave e confortável, como nunca experimentou com outras cadeiras. Biomecânica otimizada para o máximo conforto.

## A MELHOR RELAÇÃO RIGIDEZ-LEVEZA

A Octane Sub4 vai sem esforço, independentemente do caminho escolhido. Tão forte como o aço, mas mais leve 45% do que o aço, o titânio é o material com a melhor relação entre resistência e peso de todos os materiais conhecidos. Desenhada para durar, a Octane Sub4 é a cadeira em que pode confiar para o seu dia-a-dia.

## FABRICADA PARA SI, PERSONALIZADA

Sabemos que cada corpo e as suas necessidades são únicos, por isso fabricamos a Octane Sub4 totalmente personalizada, como se fosse uma extensão do seu próprio corpo. Muito mais do que uma cadeira!



\*sem rodas traseiras nem almofada

# TIGA SUB4

» A CADEIRA  
MAIS LEVE  
PERSONALIZADA



Em 1988 começámos a dar os primeiros passos no desenho e fabrico de cadeiras ultra leves de estrutura rígida de fabrico totalmente personalizado.

Hoje, quase 30 anos depois, continuamos fiéis a essa filosofia, e a nova Sub4 é a prova disso. Uma cadeira fabricada em alumínio aeroespacial na qual pusemos toda a nossa paixão e uma firme determinação em dar um passo mais à frente para podermos oferecer a cadeira personalizada mais leve do mercado... e com o máximo rendimento!

Porque pensamos que cada grama conta, otimizámos o desenho de cada elemento até ao último parafuso para podermos oferecer uma cadeira personalizada com um peso garantido por baixo dos 4 kg\*

Convidamos-te a conhecer a nova cadeira!

\*Sem rodas traseiras nem almofada

# Menos de 4kg- Garantido!

Certificamos que a estrutura da tua Tiga Sub4 de fabrico totalmente personalizado está por baixo dos 4 kg. Inclusivamente poderás ver o peso exato de tua cadeira registado na estrutura.



Este peso inclui todos os componentes da configuração standard: travões compactos, protetores laterais de carbono com fender, rodas dianteiras FrogLegs, plataforma apoio de pés de carbono e telas.

As rodas traseiras e a almofada não estão incluídos, uma vez que os poderás retirar facilmente para o transporte.

## Características

- » De fabrico personalizado, em alumínio aeroespacial grau 7 (7020)
- » Desenho otimizado do tubo da forqueta
- » Centro de Gravidade fixo
- » Encosto fixo
- » Novo desenho curvo da barra rigizadora
- » Desenho do eixo monotubo otimizado
- » Diâmetro do tubo do eixo reduzido, com fixações de titânio
- » Estrutura em alumínio brilho ou mate
- » Montagem leve dos protetores laterais
- » Travões com montagem ultra leve
- » Peso máx de utilizador: 110 kg
- » Rodas dianteiras ultra leves Froglegs com jante de alumínio, de 4" x 1.25"
- » Rolamentos desportivos
- » Apoio de pés tubular ultra ajustável em altura
- » Eixos Quick Release de titânio
- » Rodas Spinery BLXL de 18 raios



Protetores laterais ultra leves de carbono com fender



Plataforma apoio de pés ultra leve de carbono



Tela de encosto Air Tech otimizada. Ajustável em tensão e com banda central transpirável; com presilhas de titânio



Nova tela de assento transpirável e ajustável em tensão; com presilhas de titânio

# TIGA SUB4

*A NOSSA CADEIRA  
MAIS LEVE!*

Quanto mais leve for a tua cadeira, menor será o esforço que terás de despendar para a propulsar.

Assim é mais fácil.

É que, em questão de peso, até o mais pequeno detalhe poderá contribuir para facilitar as transferências para o automóvel.

Então, imagina a diferença que faz pesar menos de 4 kg!

A TIGA Sub4 propulsa-se sem esforço, graças à sua estrutura rígida, leve e com a mínima resistência à rodagem, proporcionando uma condução superior para os utilizadores mais experientes.

Rendimento e design minimalista... a TIGA SUB4 não é apenas ultra leve, é também ultra forte!



# Fabricada para adaptar-se á tua forma e medidas

## ESTRUTURA INDIVIDUALIZADA SUB4

**19 alterações no desenho para reduzir o peso da estrutura em 1.73 kg aprox.**

A estrutura da Tiga Sub 4 é fabricada de forma artesanal de acordo com as suas medidas individuais e com o alumínio da mais alta qualidade (7020).

Trabalhámos exaustivamente revendo milimetricamente cada tubo para otimizar o seu peso e garantir a maior fiabilidade.

## COMPONENTES SUB4

**37 alterações no desenho para reduzir o peso dos componentes em 1.2 kg aprox.** Seleccionámos cuidadosamente todos os componentes da tua cadeira para te oferecer a configuração mais leve e atrativa. Revimos as rodas dianteiras, os protetores laterais, travões, etc para eliminar qualquer excesso de peso e garantir a configuração mais completa e funcional. Sem extras ocultos...com tudo o

que possas precisar!

## TELAS SUB4

**16 alterações no desenho para reduzir o peso das telas em 0.8 kg aprox.**

As telas são uma das peças chave da tua cadeira. É a parte que te liga à estrutura. Daí que tenhamos analisado cada elemento até encontrar o melhor conjunto de tela de assento e encosto. Com o melhor desenho, materiais e fixações mais leves. Conforto e funcionalidade... Descobre as novas telas Sub4!

## MÁXIMO RENDIMIENTO

**Qualidade** extra no chassis e componentes.

**Robustez** para longevidade.

**Rigidez** para condução eficiente.



# TIGA

» REACÇÃO IMEDIATA  
AOS TEUS MOVIMENTOS



# A tua cadeira rígida personalizada com o máximo rendimento

Tiga fornece um mundo de sensações, reagindo de forma imediata aos teus movimentos.

A cadeira TIGA é fabricada de forma artesanal utilizando a Tecnologia mais Avançada e Alumínio da mais alta qualidade (Alu7020), combinando as tuas medidas individuais e preferências pessoais à perfeição. Sente a máxima rigidez na versão totalmente soldada! (Centro de gravidade, encosto e apoio de pés integrados no chassis). O seu rendimento, curvaturas limpas individualizadas e design minimalista, tornam-na na opção mais desportiva!

## Características

- » Chassis Rígido Personalizado alumínio 7020
- » Múltiplas opções de acessórios
- » Opção de estrutura Aberta ou Fechada
- » Detalhes anodizados de cor
- » Look Moderno e Desportivo
- » Telas de assento e encosto ajustável
- » Centro de gravidade Fixo ou Ajustável em tensão AirTech
- » Opção de Assento e Encosto Ergonómico
- » Peso máx. utilizador 125 kg

Estrutura aberta



Estrutura fechada



Detalhes anodizados de Cor



Suportes laterais ajustáveis integrados. Estabilidade lateral extra para garantir o correcto posicionamento da coluna. Prevenção de atitudes escolióticas e respectiva progressão



O formato do assento ergonómico com a secção em cunha e a secção horizontal optimiza a estabilidade pélvica, facilita a propulsão da cadeira e minimiza a fricção para proteger a pele.



Roda frontal todo-terreno. Máxima liberdade e facilidade de propulsão em todas as superfícies. Compacta e muito fácil de instalar, inclusivamente com o utilizador sentado na cadeira. Compatível com Tiga, Tiga FX e Hi Lite.

# TIGAF X

» A CADEIRA RÍGIDA QUE SE ENCARTA



# Para os mais viajantes!

A TIGA FX foi criada para que continues a viajar sem te preocupares com a tua cadeira.

O seu design inovador de encarte com sistema Q-lock permite colocá-la nos espaços mais reduzidos, cabendo inclusivamente no compartimento superior do avião e nas malas dos carros mais pequenos.

A partir de agora, preocupa-te apenas em apreciar a tua viagem!

O sistema q-lock permite um encarte compacto sem comprometer a rigidez do chassis, garantindo o máximo rendimento na condução.

Além disso, o seu fabrico individualizado de acordo com a tua fisionomia, permite que o chassis se adapte totalmente a ti, como uma segunda pele.

## Características


- » Chassis personalizado de alumínio 7020
- » Sistema de encarte Q-lock no encosto e estrutura frontal
- » Centro de gravidade fixo ou ajustável
- » Opção de assento e encosto ergonómico
- » Protectores laterais dobráveis Fold Flat
- » Apoio de pés integrado no chassis com plataforma de carbono
- » Múltiplas opções de acessórios
- » Detalhes anodizados de cor
- » Tela de assento e encosto ajustável em tensão Air Tech
- » Peso máx. utilizador 125 kg



Sistema de encarte "Q lock" estrutura frontal



Protectores de roupa dobráveis "Fold flat"

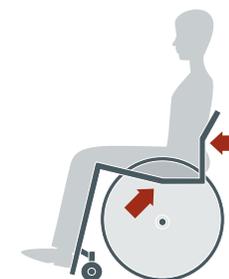

O formato do assento ergonómico com a secção em cunha e a secção horizontal optimiza a estabilidade pélvica, facilita a propulsão da cadeira e minimiza a fricção para proteger a pele.



Roda frontal todo-terreno facilita a propulsão em terrenos irregulares mantendo as rodas dianteiras sem contacto com o chão durante a propulsão em todas as direcções, incluindo para trás. Compactável com Tiga, Tiga FX e Hi Lite. 27

# Hi·Lite

» A TUA CADEIRA  
PERSONALIZADA  
EM TITÂNIO



# Máxima eficiência e comodidade de condução

O seu design e fabrico com tubos de titânio de 25 mm conferem à Hi-Lite a estética mais elegante.

As suas curvas limpas proporcionam um look clássico muito atractivo. Disponível na opção de estrutura aberta ou fechada. Sente a comodidade do Titânio e a eficiência na condução que proporciona o chassis rígido **de acordo com as suas formas e medidas**. Descobre como a tua Hi Lite se desloca contigo, com um só toque!!

## Características

- » Chassis Rígido TITÂNIO
- » Totalmente personalizável
- » Estética Elegante com tubos de 25 mm
- » Condução suave, Cómoda e Eficiente
- » Opção de Estrutura Aberta ou Fechada
- » Centro de gravidade Fixo ou Ajustável
- » Encosto Fixo (integrado no chassis) ou dobrável
- » Opção de Assento e encosto Ergonómico
- » Múltiplas opções de acessórios
- » Tela de assento e encosto ajustável em tensão AirTech
- » Peso máx. utilizador 125 kg

Estrutura aberta



Estrutura fechada



Posição do tubo da Forqueta personalizada (altura, largura e ângulo). Forqueta "low ride"



Suportes laterais ajustáveis integrados. Proporcionam estabilidade lateral extra para utilizadores que necessitam de mais suporte lateral do que o proporcionado pela tela de encosto.



O desenho do assento ergonómico com a sua secção em cunha e a secção horizontal optimiza a estabilidade pélvica, facilita a propulsão da cadeira e minimiza a fricção para proteger a pele.



Tela ajustável em tensão AirTech (Std)



# FRONTWHEEL



Se já usufruís da leveza e agilidade de movimentos da tua cadeira RGK, pensa... porquê ficar por aqui? Propõe-te a descobrir novos horizontes com a roda frontal Todo-o-terreno RGK

Coloca-a na cadeira e vive uma experiência de condução incomparável e uma liberdade máxima em qualquer superfície. Não haverá terreno que resista!

Esperam-te grandes aventuras, pelo que, onde irás hoje? Marca um objetivo e vai. A roda frontal todo-o-terreno ajuda-te a chegar onde quiseres.

Não há limites... vive a vida ao máximo com RGK!

# Roda frontal todo o terreno

## Máxima liberdade em todas as superfícies

A roda frontal todo o terreno RGK facilita a propulsão na relva, areia, lama, calçada e outros terrenos irregulares, mantendo as rodas dianteiras sem contacto com o chão durante a propulsão em todas as direções, incluindo para trás!

### Características

- » 3 Pontos de fixação no chassis
- » Compacta e muito fácil de instalar, em questão de segundos
- » É fixa ao chassis por baixo do apoio de pés para aumentar a rigidez
- » As rodas dianteiras permanecem elevadas durante a propulsão
- » Não afeta a largura do apoio de pés
- » Pode ser instalada com o utilizador sentado na cadeira
- » Pode-se bloquear na posição elevada quando não vai ser usada



Roda pneumática de 200x50 com forqueta anti-vibração.



Sistema simples de libertação /instalação.



Robusto sistema com 3 pontos de fixação no chassis.



Compatível com as cadeiras Tiga, Tiga FX e Hi Lite.

# » CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                     | Elite X          | Elite            | Grand Slam       | Club Sport                 | Octane Sub4/<br>Tiga Sub4            | Tiga            | Tiga FX         | HiLite          |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Largura do assento:</b>          | 250 a 500 mm     | 250 a 500 mm     | 250 a 500 mm     | 340, 370, 400, 440 mm      | 250 a 440 mm                         | 250 a 500 mm    | 250 a 460 mm    | 250 a 500 mm    |
| <b>Profundidade do assento:</b>     | 250 a 500 mm     | 250 a 500 mm     | 250 a 500 mm     | 300, 330, 360, 390, 430 mm | 250 a 440 mm                         | 250 a 500 mm    | 250 a 460 mm    | 250 a 500 mm    |
| <b>Altura dianteira do assento:</b> | 360 a 630 mm     | 360 a 630 mm     | 360 a 630 mm     | 480, 500, 530 mm           | 380 a 520 mm                         | 380 a 550 mm    | 480 a 550 mm    | 380 a 550 mm    |
| <b>Altura traseira do assento:</b>  | 360 a 630 mm     | 360 a 630 mm     | 360 a 630 mm     | 400, 420, 440, 530 mm      | 360 a 500 mm                         | 360 a 550 mm    | 360 a 550 mm    | 360 a 550 mm    |
| <b>Altura do encosto:</b>           | 150 a 450 mm     | 150 a 450 mm     | 150 a 450 mm     | Ajustável de 250 a 300 mm  | 100 a 400 mm                         | 150 a 600 mm    | 150 a 400 mm    | 150 a 600 mm    |
| <b>Ângulo do encosto:</b>           | De -10 a +10     | De -10 a +10     | De -10 a +10°    | Fixo a 0°                  | Personalizada                        | De -10 a +20    | De -7 a +7      | De -10 a +20    |
| <b>Camber:</b>                      | 16, 18, 20, 22 ° | 16, 18, 20, 22 ° | 16, 18, 20, 22 ° | 18 °                       | 1, 2, 3 °                            | 0, 1, 2, 3, 5 ° | 0, 1, 2, 3, 5 ° | 0, 1, 2, 3, 5 ° |
| <b>Peso máx. utilizador:</b>        | 125 kg           | 125 kg           | 125 kg           | 125 kg                     | 110 kg                               | 125 kg          | 125 kg          | 125 kg          |
| <b>Peso da cadeira:</b>             | Desde 8.1 kg     | 9.5 a 12.5 kg    | 9.5 a 12.5 kg    | 10 a 13.5 kg               | Desde 3,6 kg *                       | 6.5 a 11.5 kg   | 8.5 a 11.5 kg   | 7.5 a 11.5 kg   |
| <b>Cores da estrutura:</b>          | 30               | 30               | 30               | 26                         | Alumínio (brilho ou acetinado/ mate) | 30              | 30              | 30              |

Tolerância a de fábrica: +/- 1 cm

\* sem rodas nem almofada

Para mais informações sobre opções e disponibilidades por favor consulte os formulários de encomenda.

Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



## Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga

Vizcaya, España

Tel: +34 (0) 902 14 24 34

Fax: +34 (0) 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt



Rev.6- Março 2021