


INFINITY

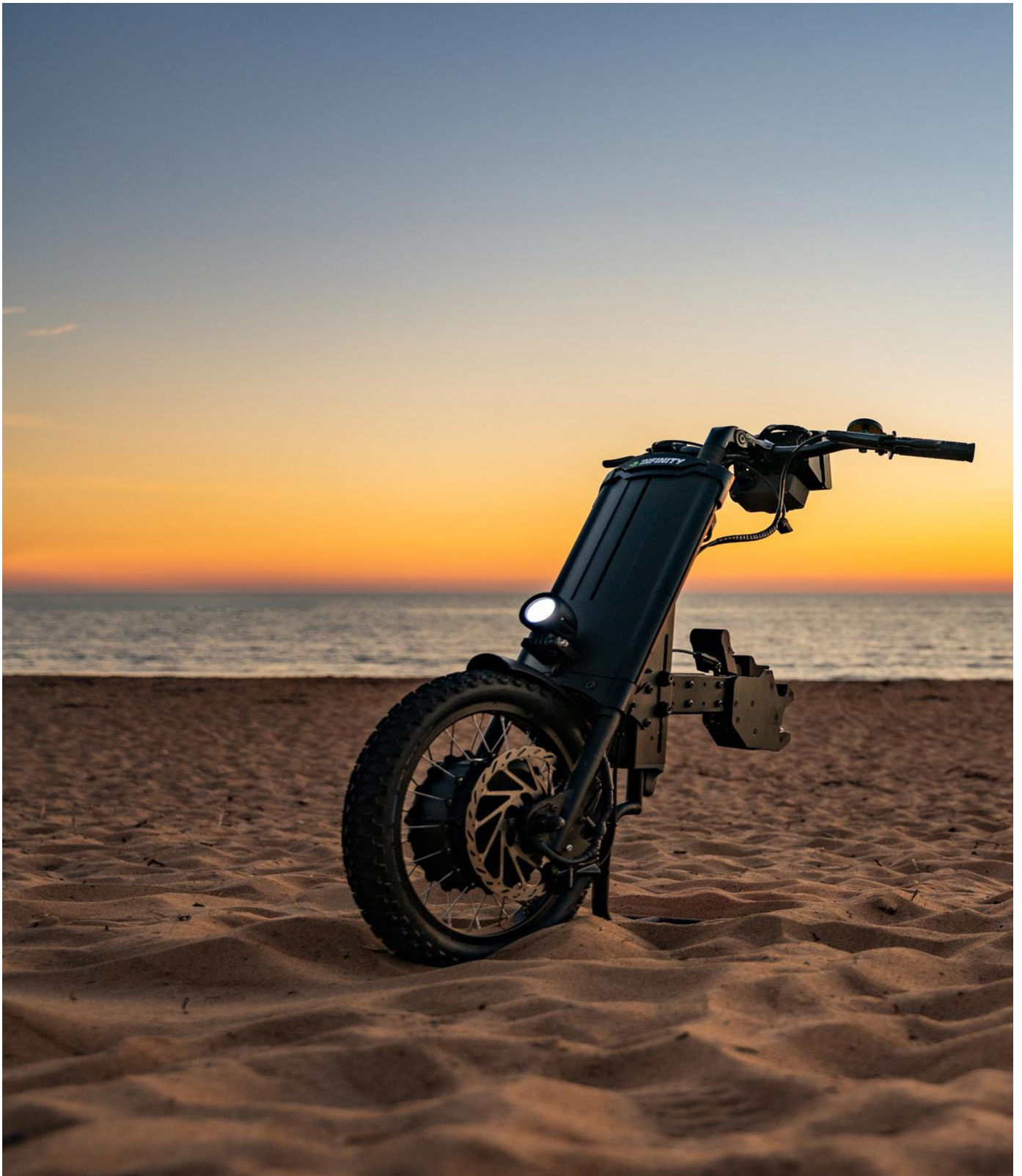

A bicicleta de mão elétrica Infinity é o produto perfeito para a máxima mobilidade e flexibilidade.

Consegue economizar tempo e energia, usando convenientemente a sua cadeira de rodas existente, para percorrer distâncias maiores do que normalmente faz com a cadeira de rodas manual.

A bicicleta de mão elétrica Infinity é o produto perfeito para a máxima mobilidade e flexibilidade - seja para ir para uma loja ou para os treinos das crianças. Infinity é fácil de ligar e desligar, em apenas alguns segundos torna a sua cadeira de rodas manual num veículo elétrico, obtendo uma autonomia de 45 km com o Infinity. Com um peso de 21kg (incl. bateria), pode levar o Infinity no seu carro, se necessário. Rodas de 16", anti-derrapagem e travão de motor marcam Infinity como um produto seguro que o auxilia no dia a dia. Programe a sua bicicleta de mão de acordo com as suas necessidades usando o perfil pessoal (aqui poderá escolher a velocidade, os temas e aceleração). Infinity é fácil de ajustar no comprimento e altura, e fácil de conectar ou desconectar.

Especificações

Motor: PM sem escovas 500W

Tipo de bateria: Li-Ion 48V, 10Ah (480 Wh)

Peso total: 21 kg incl. bateria (peso da bateria 3 kg)

Dimensão da roda: 16"

Alcance máximo (com bateria totalmente carregada): 45 km *(tipo de condução, superfície e peso do usuário afetam o alcance máximo)*

Fusível: Eletrónico 20A

Peso máximo do usuário: 125 kg

Inclinação máxima: 8 graus (com um peso de usuário de 100 kg)

Carregador de bateria: 100-240 VAC, 50/60Hz

Tempo de carregamento: Carregamento normal ca 3-4 horas

Garantia: 2 anos

Marcação CE: Em conformidade com MDR 2017/745 classe 1