

BREEZY PREMIUM

DURADOURA,
RESISTENTE E ROBUSTA



DURADOURA, RESISTENTE E ROBUSTA

A fiel companheira de vida!



 B R E E Z Y
PREMIUM



Configuração com opções



A CADEIRA EM AÇO COM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE SINGULARES


DURABILIDADE

Breezy Premium, é a melhor aliada que poderia desejar! Uma cadeira de outra geração, desenhada ao detalhe para perdurar no tempo graças à sua incrível resistência, robustez e ergonomia. A sua estrutura em aço de elevada qualidade e resistência garante uma funcionalidade sem igual no dia-a-dia, convertendo-a numa cadeira de total confiança.



DETALHES QUE MARCAM A DIFERENÇA

Breezy Premium é uma cadeira que oferece funções muito variadas que tornam a vida mais fácil. Todos os elementos foram cuidadosamente desenhados para oferecer uma cadeira de confiança, ultra resistente e duradoura. Para oferecer, em definitivo...um produto Premium! Detalhes como a alavanca dos travões com pega ergonómica e a possibilidade de os regular em altura, ou a alavanca de movimentação dos apoios de pés de grandes dimensões fazem da Breezy Premium uma cadeira que causa sensação.

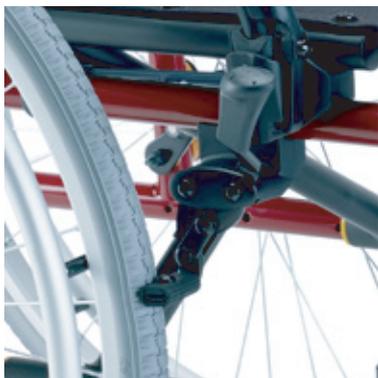

Travão com pega ergonómica e pastilha de travão otimizada para uma travagem segura.



Apoios de pés desmontáveis, rebatíveis e resistentes, com alavanca de travão cómoda, acessível e ergonómica. Plataformas ajustadas à largura da cadeira.

COM O MELHOR SERVIÇO

Para além do mais, com a confiança e a certeza de contar com o melhor e o mais rápido serviço de pós-venda: disponibilidade total em trocas e de peças, prazo de entrega imediato (24 horas) e a possibilidade de realizar inúmeras e incríveis personalizações como, por exemplo, serigrafias nos tecidos.

A MELHOR SELEÇÃO

Possibilidade de escolher entre 3 modelos diferentes em função do tipo de encosto desejado (Standard, Partido ou Reclinável). Para além disto, existe também a opção de escolher entre 4 cores atuais para agradar a todos os gostos, contando ainda com uma ampla gama de acessórios disponíveis para adaptar a cadeira às necessidades específicas de cada utilizador.



3 TIPOS DE ENCOSTO



Encosto Standard



Encosto Reclinável



Encosto Partido

GAMA DE CORES

4 cores disponíveis para cada uno de los modelos.



Verde musgo



Vermelho rubi



Azul marinho



Cinza antracite

AJUSTÁVEL – DISTÂNCIA ENTRE RODAS

Alterando a posição do encaixe do eixo da roda traseira, permite ajustar a distância entre as rodas dianteiras e traseiras. Conseguem-se assim aumentar ou diminuir o comprimento da cadeira em função do raio de viragem que se pretende obter. Ao diminuir o raio de viragem, consegue-se uma cadeira mais ativa, e aumentando-o, obtém-se uma cadeira mais estável.



Eixo avançado
Posição Std. do centro de gravidade (+25mm)
Cadeira mais ativa



Eixo recuado
Centro de gravidade -50mm, cadeira mais estável

3 ALTURAS DE ASSENTO AO SOLO DISPONÍVEIS

A Breezy Premium permite seleccionar até 3 alturas do assento ao solo diferentes (50,5, 48 ou 45,5 cm). A altura varia em função das rodas dianteiras e traseiras que se instalem e das suas posições na forqueta.

CONFORTO SEM LIMITES

COMPRIMENTO TOTAL REDUZIDO

O desenho único da parte frontal e a posição das rodas traseiras permitem obter dimensões incrivelmente compactas. Ao retirar os apoios de pés, consegue-se um comprimento total de apenas 76,5 cm. É bastante útil, por exemplo, para aceder com a cadeira aos elevadores.



NUMEROSAS OPÇÕES DISPONÍVEIS

A Breezy Premium adapta-se às necessidades dos diferentes utilizadores. E para isso, oferece uma extensa gama de opções e acessórios, com o objetivo de adaptar a cadeira às necessidades específicas de qualquer pessoa.


- Assentos e encostos anatómicos
- Tecido antitranspirável Vented
- Plataformas de alumínio ajustáveis em ângulo
- Apoios de pés eleváveis e rebatíveis
- Plataforma única
- Apoios de cabeça
- Travões de tambor
- Suporte para soro
- Suporte para canadianas
- Alargador de travão
- Sistema duplo amputado
- Rodas anti capotagem
- Rodas de trânsito
- Porta garrafas
- Mesa
- Cintos
- Mochila...



ENCOSTO STANDARD

CONFIGURAÇÃO STANDARD

- Cadeira articulada em aço, com encosto Standard
- Tecido de Nylon
- Apoios de braços rebatíveis para trás
- Apoios de pés Standard a 70°, rebatíveis e desmontáveis
- Rodas traseiras Sport
- Cores: verde musgo, vermelho rubi, azul marinho ou cinza antracite

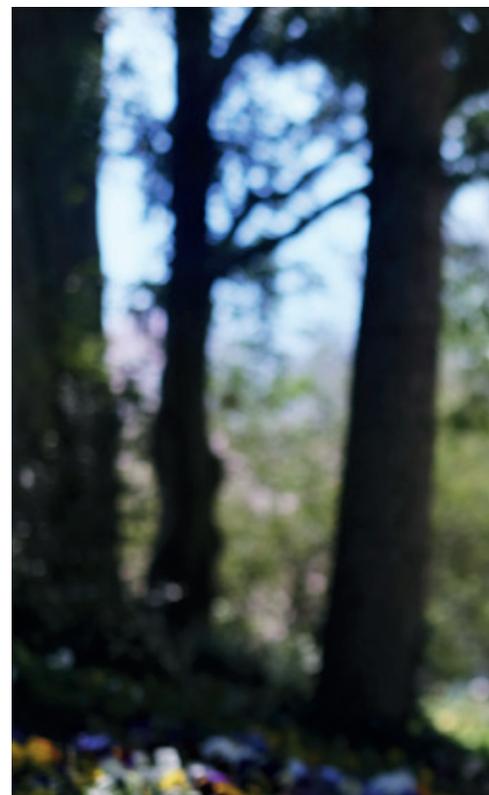

Configuração Standard




BREEZY PREMIUM COM ENCOSTO
STANDARD, RODAS TRASEIRAS
MACIÇAS DE 12" E TECIDO
ANTITRANSPIRÁVEL VENTED



ENCOSTO RECLINÁVEL

CONFIGURAÇÃO STANDARD

- Cadeira articulada em aço, com encosto reclinável até 60°
- Tecido de Nylon
- Apoios de braços em forma de T, ajustáveis em altura e profundidade (com a utilização de ferramentas) e desmontáveis
- Apoios de pés Standard a 70°, rebatíveis e desmontáveis
- Rodas traseiras Sport
- Cores: verde musgo, vermelho rubi, azul marinho ou cinza antracite

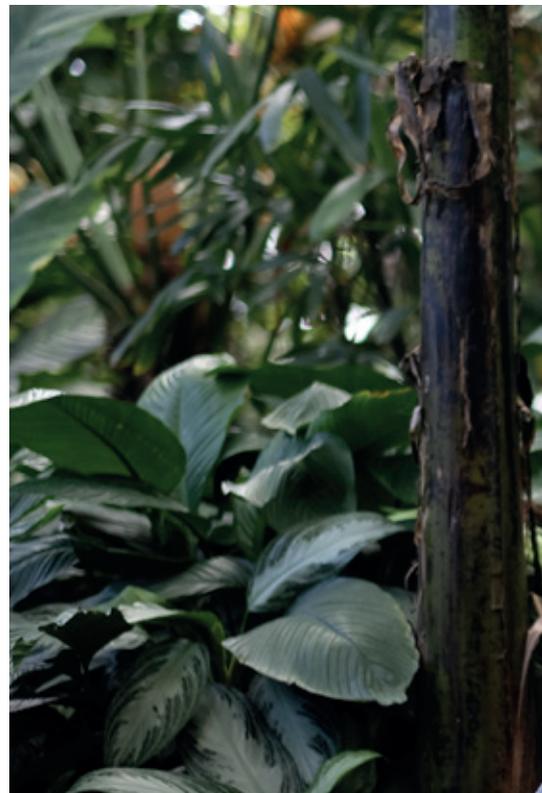

Configuração Standard com apoio de cabeça em tecido e eixos de desmontagem rápida (opcionais)



BREEZY PREMIUM COM CONFIGURAÇÃO OPCIONAL E ACESSÓRIOS

- Rodas traseiras maciças de 12"
- Apoios de braços em forma de T, ajustáveis em altura e profundidade (com a utilização de ferramentas) e desmontáveis
- Assento Anatômico
- Encosto Anatômico
- Apoio de cabeça em sky
- Apoios de pés eleváveis



ENCOSTO PARTIDO

CONFIGURAÇÃO STANDARD

- Cadeira articulada em aço, com encosto partido que se dobra pelo meio para guardar e transportar com maior comodidade
- Tecido de Nylon
- Apoios de braços rebatíveis para trás
- Apoios de pés Standard a 70°, rebatíveis e desmontáveis
- Rodas traseiras Sport
- Cores: verde musgo, vermelho rubi, azul marinho ou cinza antracite



Configuração Standard



Breezy Premium
fechada



BREEZY PREMIUM COM
ENCOSTO PARTIDO E
RODAS TRASEIRAS
MACIÇAS DE 12"



OPÇÕES E ACESSÓRIOS



TECIDOS



Tecido respirável Vented

APOIOS DE PÉS



Plataforma única




Plataformas de alumínio reguláveis em ângulo



Apoios de pés eleváveis

APOIOS DE BRAÇOS

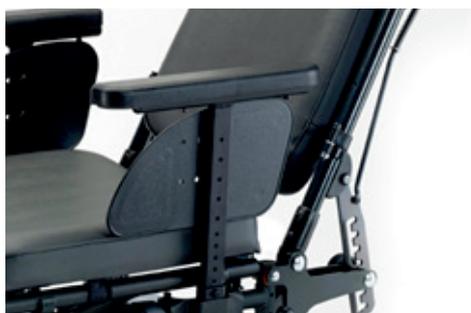

Apoios de braços em forma de T reguláveis em altura (com utilização de ferramentas)



Apoios de braços ajustáveis em altura

ENCOSTO



Punhos reguláveis em altura

APOIOS DE CABEÇA



Apoio de cabeça sky com encosto em tecido



Apoio de cabeça anatômico com encosto de tela



Apoio de cabeça sky com encosto anatômico



Apoio de cabeça anatômico com encosto anatômico



ANATÓMICOS E CINTOS

Encosto
anatômico

Assento anatômico sem
receptáculo para fins sanitários



Assento anatômico
com receptáculo para
fins sanitários

Cunha abductora



Cinturón



Modelo Breezy Premium com encosto
reclinável e conjunto de anatômicos

RODAS



Rodas dianteiras pneumáticas de 8"x2"



Rodas dianteiras maciças de 8"x2"



Rodas dianteiras maciças de 6"



Rodas traseiras de 12"
(pneumáticas ou maciças)



Roda traseira com raios de 24"
(maciça ou pneumática) ou
pneumática de 22"



Roda traseira Sport 24"
(pneumáticas ou maciças)



Eixo de desmontagem rápido
para rodas traseiras

TRAVÕES



Alargador de travão



Travão de tambor para roda de 24" e 12"

DIVERSOS



Mochila



Porta documentos



Mesa



Suporte para soro



Suporte para canadianas



Porta garrafa de oxigénio



Rodas de trânsito



Rodas anti capotagem



Sistema duplo amputado

Outras opções: sistema de hemiplégico, apoios de pés curtos, apoios de pés fixos, sistema contra o dobragem...



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura do assento	37 / 40 / 43 / 46 / 49 / 52 cm	Comprimento total do modelo reclinável com rodas de 12"	105 cm (79,5 cm sem apoios de pés)
Profundidade do assento	42 cm	Altura total	94 cm (128 cm com encosto reclinável e apoio de cabeça)
Altura do assento	50,5 cm (48 ou 45,5 cm com rodas de 22 e 6")	Ângulo do assento	3°
Altura do encosto	44,5 cm (82 cm com encosto reclinável e apoio de cabeça)	Ângulo do encosto	8°
Largura total	Largura do assento + 19 cm (rodas de 24") Largura do assento + 16,5 cm (rodas de 12")	Cores	Verde musgo, vermelho rubi, azul marinho e cinza antracite
Comprimento total com rodas de 24"	103 cm (76,5 cm sem apoios de pés)	Peso máximo do utilizador	125 kg
Comprimento total com rodas de 12"	95 cm (68,5 cm sem apoios de pés)	Peso	Desde 16.5 kg (cadeira completa)*
Comprimento total modelo reclinável	113 cm (87,5 cm sem apoios de pés)	Largura fechada	31 cm

* Modelo Breezy Premium Configuração standard, largura 37.
Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm