

Handicare 1100

MEDICAL  **plus**
Produtos Médicos e Hospitalares



PÁG 5 **ESTAMOS FELIZES POR FICAR EM CASA**

*“Graças à nossa cadeira de escada
somos independentes na nossa casa”*

PÁG 7 **ARTE TECNOLÓGICA**

*Cadeira elevatória revolucionária e
uma peça de arte tecnológica.*

A cadeira para escadas reta da Handicare

SEGURA, ESTREITA E INTELIGENTE.

Todas as nossas cadeiras de escada são silenciosas, seguras e de fácil utilização. Não importa como é a escada, as nossas cadeiras são compactas e adaptáveis. Mesmo nas escadas mais estreitas, depois da instalação, fica espaço suficiente disponível para a sua utilização normal.

Alta qualidade em todos os aspectos torna a cadeira Handicare um verdadeiro aliado para a sua independência. Ela permite-lhe continuar a viver na sua própria casa, livre dos riscos associados às escadas. Uma cadeira de escadas dá-lhe liberdade de movimentos e paz de espírito. Muitos dos nossos clientes vivem essa experiência diariamente e com satisfação.



CONFORTO

Os confortáveis assentos das nossas cadeiras estão equipados com braços de apoio e cinto de segurança.



FÁCIL DE USAR

Ergonómico e de uso intuitivo, o joystick opera a cadeira com suavidade.



ADAPTÁVEL


Cada guia é desenhada e fabricada para se adaptar à sua escada, assegurando o maior espaço possível para os outros utilizadores da escada.





COMPACTA E REBATÍVEL


Rebata a cadeira quando não está em uso para libertar espaço na escada.

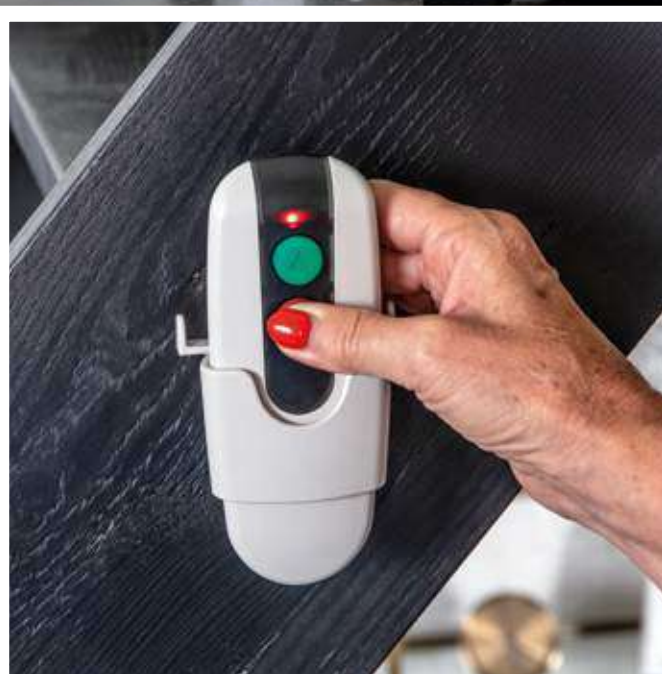

COMANDO REMOTO

Dois comandos remotos estão incluídos para que possa enviar ou chamar a cadeira com o simples pressionar de um botão.

A cadeira para escadas retas da Handicare

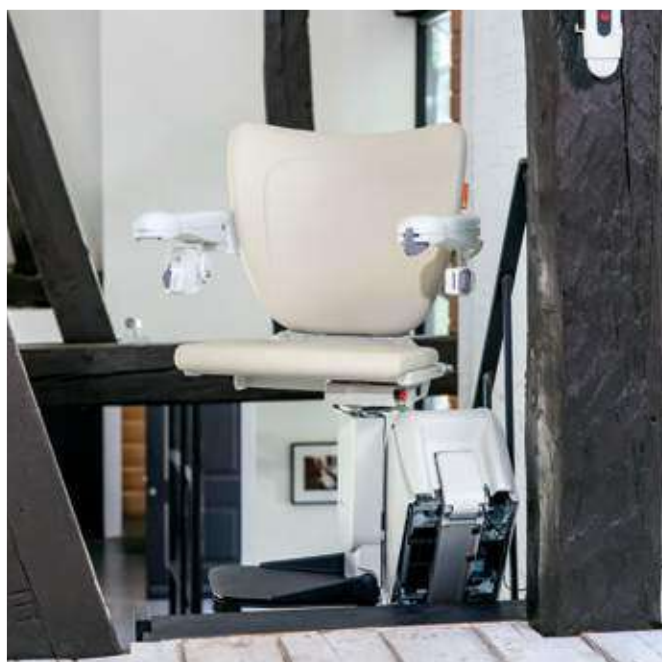

ASSENTO DE ROTAÇÃO AUTOMÁTICA

Pela acção do joystick o assento gira na direcção do patamar superior. Assim se torna segura e fácil a operação de aceder ao patamar superior.



PRIMEIRO A SEGURANÇA

A opção de rebatimento automático do poisa pés permite que não tenha de se baixar para o fazer. Segurança e conforto assegurados.

As vantagens da sua cadeira de escada

Com diversas opções e características, a cadeira recta da Handicare será uma valiosa aquisição para a sua casa.



Guia rebatível

Para se assegurar de que a guia não seja uma obstrução para uma porta ou corredor, a Handicare oferece o rail rebatível. O seu funcionamento é manual e sem esforço.



Guia deslizante

A guia deslizante da cadeira 1100 permite libertar espaço em ambos os patamares da escada, o inferior e o superior.



Cinto de segurança

A cadeira possui um cinto de segurança para um percurso mais seguro.






Assento giratório

No topo superior da escada o assento gira na direcção do patamar para que possa levantar-se mais facilmente e em segurança. Esta operação pode ser manual ou automática.




Guia revolucionária

A guia da 1100 é a mais estreita do mercado, assegurando uma instalação não intrusiva. Graças ao sistema de 4 roletes de fricção em vez da tradicional cremalheira é silenciosa, confortável e de fácil manutenção. Finalmente como standard uma guia de carga contínua assegurando que as baterias estão sempre carregadas, independentemente onde fique a cadeira parada.

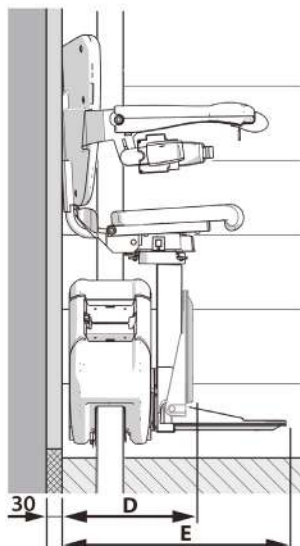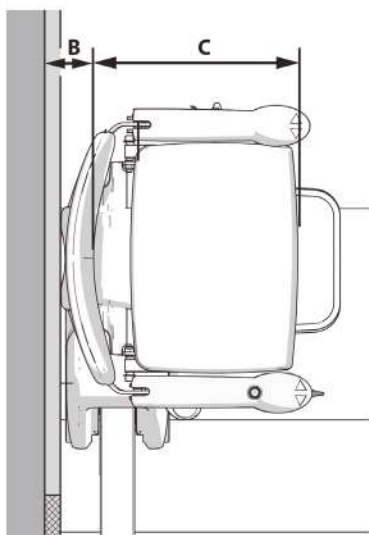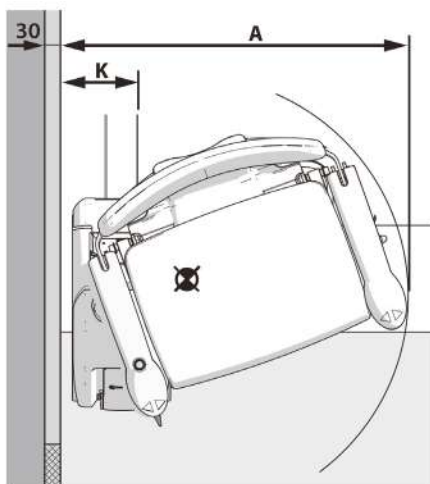

Asiento 1100 Style		Dimensiones
A	Radio de giro	645mm
B	Mínimo a respaldo	60mm
C	Profundidad de silla	390mm
D	Ancho mínimo plegado hasta reposapiés	320mm
E	Ancho mínimo abierto hasta el borde del reposapiés	530mm
F	Ancho apoyabrazos - externo	575mm
G	Ancho apoyabrazos - interno	450mm
H	Altura respaldo	400mm
I	Altura reposapiés hasta silla	430 - 520mm
J	Altura mínima reposapiés	70mm
K	Parte delantera del riel	160mm
Capacidad de peso maxima		30-45° - 140kg 46-50° - 130kg
Velocidad		0.15m/sec
Ángulo máximo de la escalera		30-50°

Algunas de las medidas arriba indicadas dependen de la situación de la escalera en la vivienda. Para más información sobre estas medidas y las características de la silla, consulte el manual de venta. Toda la información se proporciona de buena fe pero no constituye una garantía. Handicare se reserva el derecho de modificar los diseños y especificaciones sin previo aviso.

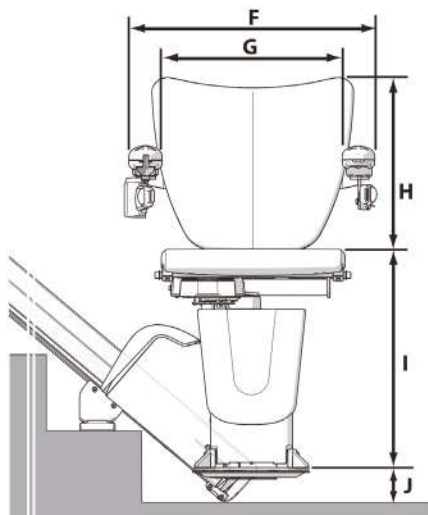

T: UK/USA > 0031 72 75 11116
 GER > 0031 72 75 11117
 FRA > 0031 72 75 11118
 ROW > 0031 72 75 11119
 F: 0031 72 57 68 877
 E: data@handicare.com